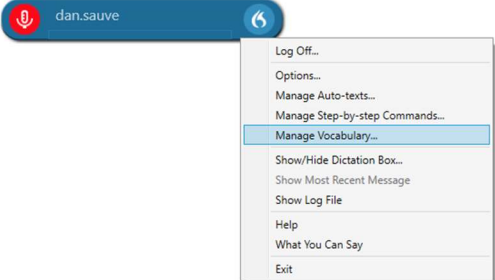
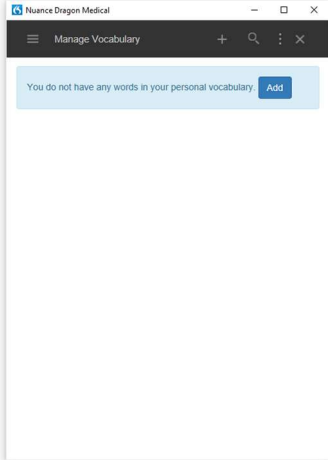
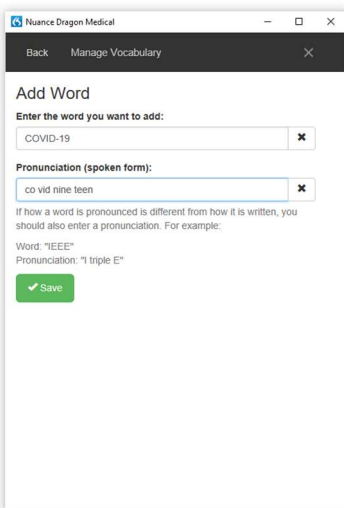


Hoe kan ik "COVID-19" toevoegen aan de Dragon Medical One-woordenschat?

Volg deze stappen om Dragon Medical One te leren de term 'COVID-19' te herkennen.

1.	Selecteer "Lexica beheren..." in het Dragon menu.	
2.	Klik op "Toevoegen" in het pop-upvenster "Lexica beheren".	
3.	Op het "Woord toevoegen" scherm, typ COVID-19 in het invoerveld, en klik dan op de "Voer het woord in zoals u het zou uitspreken" link. Belangrijk: <ul style="list-style-type: none">• <u>Klik niet</u> op de optie 'Standaarduitspraak gebruiken'; om de term goed te kunnen herkennen, moet u Dragon in de volgende stap leren hoe u deze uitspreekt.• Dragon herkent de term <u>niet</u> als u op de rode microfoon klikt om het systeem met uw stem te trainen. Ga in plaats daarvan door naar de volgende stap en leer Dragon de fonetische spelling van de term.	

<p>4.</p>	<p>Leer Dragon hoe je COVID-19 uitspreekt door het invoeren van de gesproken vorm van de term (fonetische spelling "kovid negentien") zoals weergegeven in de schermafbeelding. Klik op "Opslaan" als u klaar bent.</p>	
<p>5.</p>	<p>"COVID-19" is nu toegevoegd aan het lexica. U mag dit venster sluiten.</p> <p>Opmerking: Als Dragon uw uitspraak van de term na dit proces niet goed herkent, herhaalt u deze stappen en past u de fonetische spelling van de term in stap 4 aan aan de hand van de manier waarop u persoonlijk COVID-19 uitspreekt.</p>	