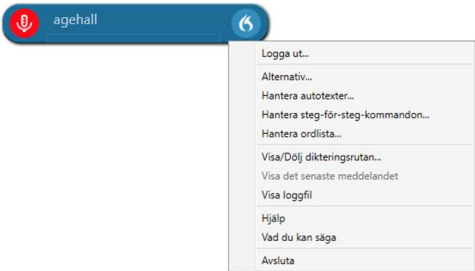


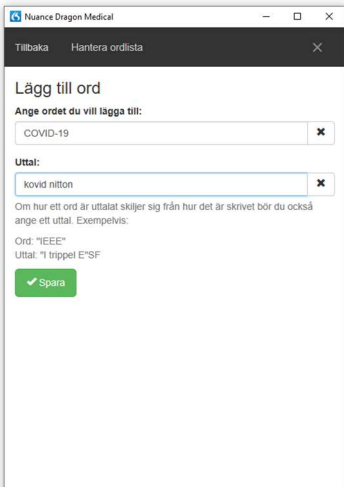


Lägga till "COVID-19" till vokabulären i Dragon Medical One

Följ dessa steg för att lägga till relevanta ord för den nuvarande COVID-19-krisen i Dragon Medical One.

1.	I Dragon-menyn, väl "Hantera ordlista..."	
2.	Klicka på plustecknet i menyraden.	
3.	<p>I dialogen "Lägg till ord" skriver du in "COVID-19" som det ord du vill lägga till. Därefter klickar du på länken "Ange ordet som du skulle uttala det" nere till höger i dialogen.</p> <p>Viktigt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Klicka inte på "Använd standarduttal" eftersom du då inte får ange hur ordet ska uttalas i nästa steg.• Dragon kommer troligen inte kunna hantera att du dikterar uttalet av ordet så använd inte den röda mikrofon-ikonen.	

<p>4.</p>	<p>Lär dragon hur uttalet av COVID-19 låter på Svenska. Någoting i stil med "kovid nitton" bör fungera väl. Tryck slutligen på "Spara."</p>	
<p>5.</p>	<p>"COVID-19" har nu lagts till i din ordlista och du kan stänga denna ruta.</p> <p>Notera: Om Dragon fortfarande inte känner igen COVID-19 så kan du redigera uttalet av ordet igen för att hitta ett uttal som fungerar för dig!</p> <p>Slutligen kan vi även rekommendera att lägga till SARS-CoV-2 (uttalas ungefär "sarz kov två") och kanske även enbart "COVID".</p>	