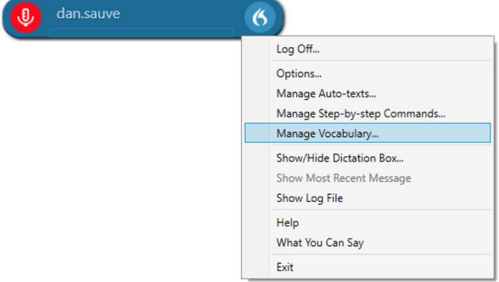
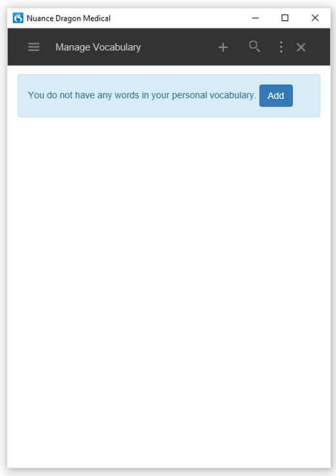
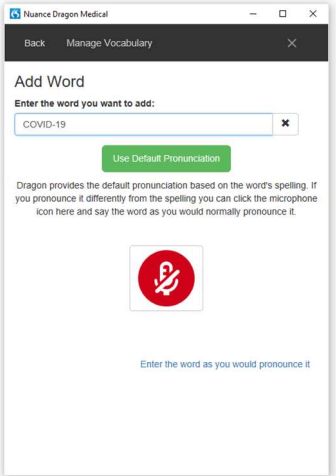
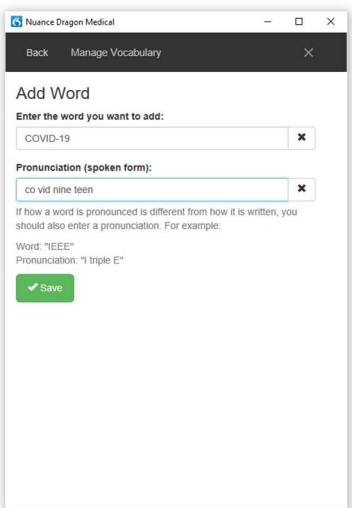


Cómo añadir “COVID-19” al vocabulario de Dragon Medical One

Siga los siguientes pasos para enseñar a Dragon Medical One cómo reconocer el término “COVID-19”.

1.	Seleccione “Administrar Vocabulario...” en el menú de Dragon	
2.	En la Ventana de “Administrar Vocabulario” Haga clic en “Añadir”	
3.	<p>En la Ventana de “Agregar palabra” teclee COVID-19 en el campo de texto y haga clic en el link “Introduzca la palabra como la pronunciaría normalmente.”</p> <p>Importante:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>No haga clic</u> en “Utilizar pronunciación predeterminada”. Para que esta palabra sea reconocida correctamente tendrá que enseñar a Dragon como la va a pronunciar.• Dragon no reconocerá la palabra si hace clic en el micrófono rojo para entrenarla usando su voz. En lugar de eso vaya al siguiente paso para enseñar a Dragon la fonética de la palabra.	

<p>4.</p>	<p>Enseñe a Dragon como pronunciar COVID-19 introduciendo la pronunciación de la palabra (por ejemplo “covid diecinueve”) tal y como se ve en la imagen. Haga clic en “Guardar” cuando haya terminado.</p>	
<p>5.</p>	<p>“COVID-19” se ha añadido al vocabulario de Dragon. Ya puede cerrar esta Ventana.</p> <p>Nota: Si Dragon no reconoce la palabra cuando la dicta, repita los mismos pasos ajustando la pronunciación en el paso 4 según su forma de pronunciar COVID-19.</p>	